



FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE AUTOMAT 3400

CÓDIGO: FT-PD-05


VERSIÓN: 02

FECHA: Mayo-2024

Autoclave con cuatro programas de esterilización, utilizando como agente esterilizador vapor de agua saturado. Cuenta con Registro Sanitario INVIMA No. 2018DM-0018563



¡NUEVO SISTEMA DE VACÍO DE ALTA EFICIENCIA!

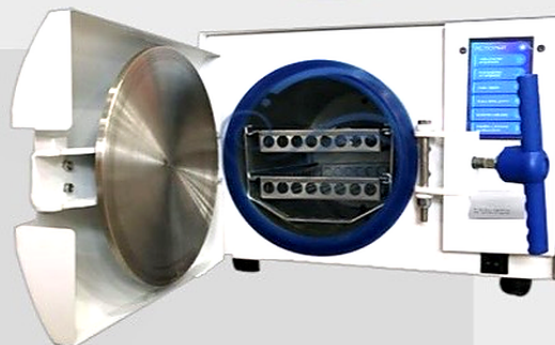

CARACTERÍSTICAS

- Proceso de esterilización y variables de temperatura y presión controlados por microcontrolador.
- Panel de control de membrana para inicio y parada de emergencia.
- Tanque de reserva de agua para llenado de cámara.
- Cuatro programas de esterilización:
 - Instrumental empaquetado.
 - Instrumental libre sin empaque.
 - Ropa, telas y gasas.
 - Líquidos o envases.
- Válvula de seguridad de sobre presión.
- Alarma sonora de sobre calentamiento.
- Alarma que indica si hubo un error durante el proceso.
- Tiempo de esterilización y secado programable.
- Cámara de acero inoxidable 304 (opcional 316).
- 2 bandejas de acero inoxidable 304 (opcional 316).
- **Opcional:** Bomba de Vacío de alta eficiencia para procesos de Calentamiento y Post-Esterilización
- **Opcional:** Impresora para registro de datos.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Previo a la instalación del equipo se debe garantizar una conexión eléctrica estable con su respectivo polo a tierra y un breaker de protección con la capacidad suficiente para la potencia de operación del equipo.
- Para la operación del equipo es muy importante y se recomienda leer el manual de usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Automat 3400	
Capacidad de cámara	34 litros	
Voltaje de operación	110 VAC	220 VAC (Opc)
Corriente de entrada	14 Amp	7 Amp
Breaker del circuito	20 Amp	10 Amp
Consumo de potencia	1500 Vatios	
Frecuencia de la línea	50-60 Hz	
Temperatura operación	121°-123 °C	134°C (Opc)
Presión de trabajo	20 a 25 PSI	20 - 36 PSI
Presión máxima	30 PSI	40 PSI
Medidas externas	Ancho 50,5 cm	
	Alto: 37,5 cm	
	Largo: 72,5 cm	
Medidas internas de cámara	Diámetro 25,9 cm	
	Longitud: 54,5 cm	
Medidas de bandejas	Ancho: 20,4 cm	
	Alto: 3,0 cm	
	Largo: 53,2 cm	
Peso	60,0 kg	

